


INTRODUCCIÓN


1. Instalar las baterías en la parte posterior de la báscula.

2. Con su Smartphone, descargar e instalar la app "AIFIT" desde su Marketplace o escaneando directamente el siguiente código QR:

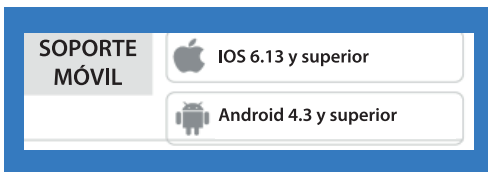

3. Abrir la Aplicación, regístrese y seleccione sus características: Peso, altura y edad. Con un solo registro, pueden haber 8 usuarios distintos.

4. Por último, encienda el Bluetooth de su Smartphone para emparejarlo con la báscula.

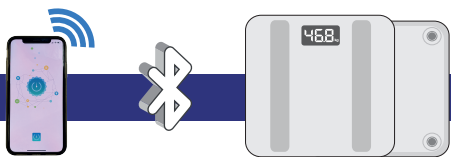

MODO DE USO

Puede utilizar la báscula de forma normal o si lo desea mediante la Aplicación (obtención de datos).

IMPORTANTE: Si quieres obtener todos los parámetros, tienes que quitarte los zapatos y calcetines, y situar los pies, encima de la parte metálica. De lo contrario solo medirá el peso.

1- Para utilizarla con la aplicación, habrá la app de su Smartphone antes de pesarse, de esta forma detectará que usuario va a utilizarla para guardar los datos.

(Importante: si no tiene el App abierta, esta no registrará los datos). Para comprobar que esta utilizando el Bluetooth, se mostrará el icono en la báscula.

2- Una vez este sobre la báscula, es importante esperar a que los 5 círculos se muestren en la pantalla, durante este tiempo (5 seg) aproximadamente, no se mueva de la báscula, ya que estará realizando todas las mediciones.

3- Cuando haya finalizado este proceso, verá todos los datos en su dispositivo.

ESPECIFICACIONES

Equipado con un sensor de medición de alta precisión.

Máxima Carga 180kg.

Mínima División 100g.

MEDICION EN KG, LB y ST (seleccionable).

PANTALLA LCD.

ENCENDIDO POR LEVE CONTACTO EN LA SUPERFICIE.

PUESTA A CERO AUTOMÁTICA.

INDICADOR DE SOBRECARGA.

INDICADOR BATERÍA BAJA.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Batería LR-03 1.5V (2 unidades incluidas).



PRECAUCIONES Y CONSEJOS

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana, lo que permitirá una lectura más precisa.
- Efectúe la medición siempre con la misma báscula colocada en el mismo sitio. En ocasiones, el tipo de superficie puede afectar a la medición.
- Puede haber una oscilación de 100g entre dos mediciones muy seguidas.
- Limpie la báscula con un paño húmedo y no deje que el agua se filtre dentro del mecanismo de la báscula, ya que podría dañar su electrónica.
- No use productos agresivos para su limpieza.
- Extraiga las baterías si no se tiene previsto su uso, en un tiempo prolongado.
- No use esta báscula si lleva un marcapasos.

• ATENCIÓN: SUPERFICIE RESBALADIZA CUANDO ESTÁ MOJADA.

Distribuido por:
**ELECTRO DH S.A. Fortuna, 29.
08902 L'Hospitalet de Ll. (Barcelona)**



HECHO EN CHINA

DäHer

 Instrucciones de uso

Báscula BLUETOOTH de baño DIGITAL

Mod.93.002/APP

